



オルベスコ 各部位の名称

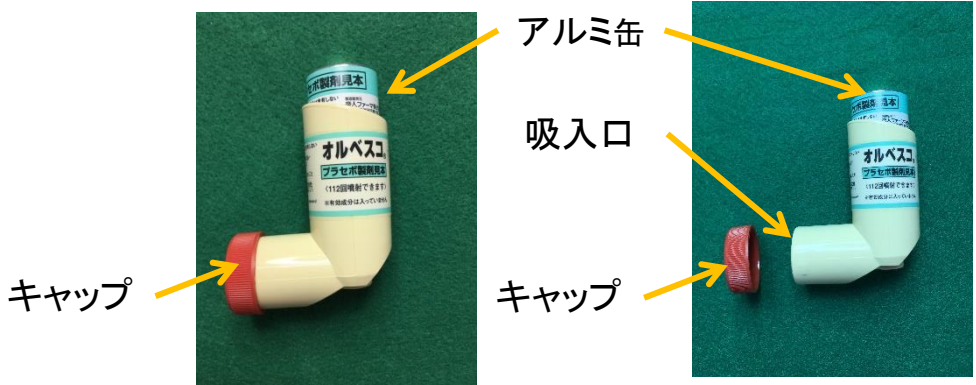

オルベスコ 吸入補助器具

残量測定器(ピヨスケ)

使用開始・終了日シール

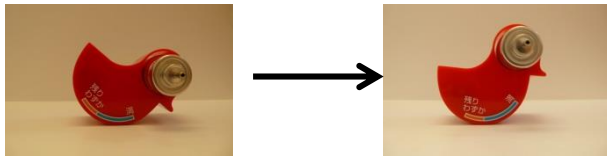

残量が多い

残量が少ない



スパーサー
(例: オプティチャンバー)

噴霧補助具



オルベスコ
装着後



オルベスコ 初回準備操作

初回準備

- 外側のフィルムをはがし、アルミ缶がアダプターに正しく装着されていることを確認する
- キャップをはずす
- アルミ缶の底を3回押して、噴霧を確認する(初回準備噴霧)

初回
のみの
操作

・初回準備噴霧は開封時または1週間以上使用しなかった時のみ
・毎行わないように注意する。
・アルミ缶がアダプターから外れていると定量噴霧されない。

オルベスコの吸入チェックリスト

※ときどきアダプターの吸入口の内側と外側を乾いた布もしくはティッシュで拭く

(吸入口の詰まりを防ぐ)

※口操作は押しボタンを上にして行う

※口アルコール過敏症でないことを確認する。

(1パフにビール約1滴のエタノールが含まれている)

