

タービュヘイラー 各部位の名称


シムビコート

パルミコート




カウンター 使用終了の目安

シムビコート

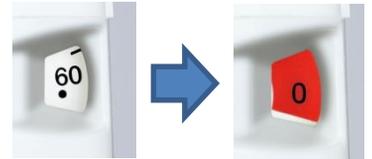

パルミコート

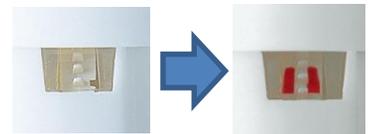

カウンター
(残りの吸入回数)

トレーナー<笛>：タービュテスター

シムビコート用 (赤) パルミコート用 (紫)

タービュヘイラーの最低吸気流速は30L/minでありタービュテスターは35±5L/min以上の吸気速度で音が鳴るように設計されている。

グリップサポーター

回す際にうまく回せない方や、回す方向が分かりにくい方へ



発作治療薬の理解

※シムビコートを発作治療薬として使用する場合の確認事項※

- 長期管理薬（定期薬）ではなく発作治療薬であることを理解している。
- 常時携帯する必要性を理解できている
- 発作時は最初の吸入から20分後に症状があれば追加吸入し、さらに20分後にも症状がある場合はもう一度吸入し、それでも症状があれば、すぐに救急受診することが理解できている。
- 指示された1日の吸入上限回数を使用した場合は、医療機関を受診することが理解できている。

用法用量の理解

タービュヘイラーの初回準備方法

初回操作

- キャップを回して外す
- 吸入器をまっすぐに立て左右に回して「カチッ」と3回（パルミコートは2回）鳴らす（必要回数回したら止める）

初回のみ
の操作



カチッ

クルッ

- ・初回のみ操作であり毎行わないように説明して理解を確認する。
- ・吸入しないときに回転グリッ プを左右にまわしてしまうとカウンターが進むため注意。

タービュヘイラーの吸入チェックリスト (商品名：シムビコート、パルミコート)

※□喘息発作治療薬としても使用する場合 (SMART療法) は常時携帯する必要性があることを説明し理解を確認する。

