


フルティフォーム 各部位の名称



フルティフォーム 吸入補助具

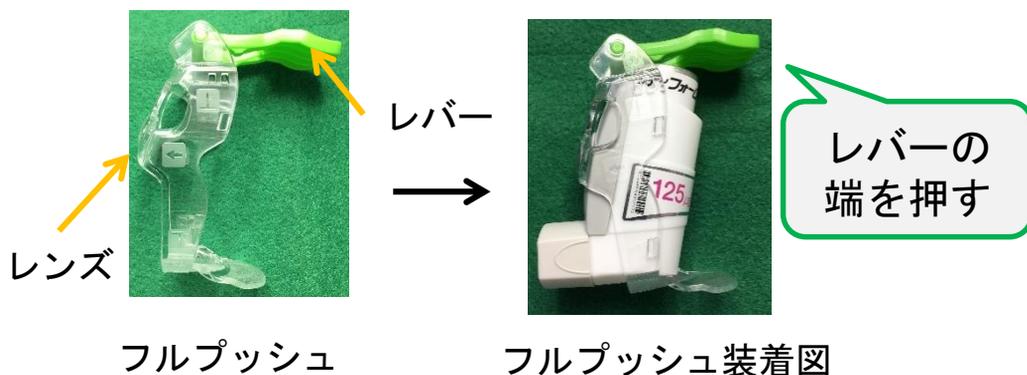

Spacer
(Example: Optichamber Diamond)

フルティフォームの初回準備方法

初回操作	<input type="checkbox"/> キャップを外す <input type="checkbox"/> 容器を数回 (5回程度) よく振る <input type="checkbox"/> 体から離してアルミ缶を押し、4回空噴霧する	初回のみ の 操作
------	--	-----------------

- ・ 初回のみ操作であり毎回行わないように説明して理解を確認する。
- ・ 3日以上使用していなかった場合も同様に初回操作を行う。

フルティフォームの吸入チェックリスト


※内側のアルミ缶をアダプターから外さない

※少なくとも週1回以上アダプターの吸入口の外側と内側を乾いた布やティッシュペーパーでよく拭き、清潔に保管する

※口操作はアルミ缶をまっすぐに立てて行う

※口アルコール過敏症でないことを確認する

(1パフにビール約1滴のエタノールが含まれている)

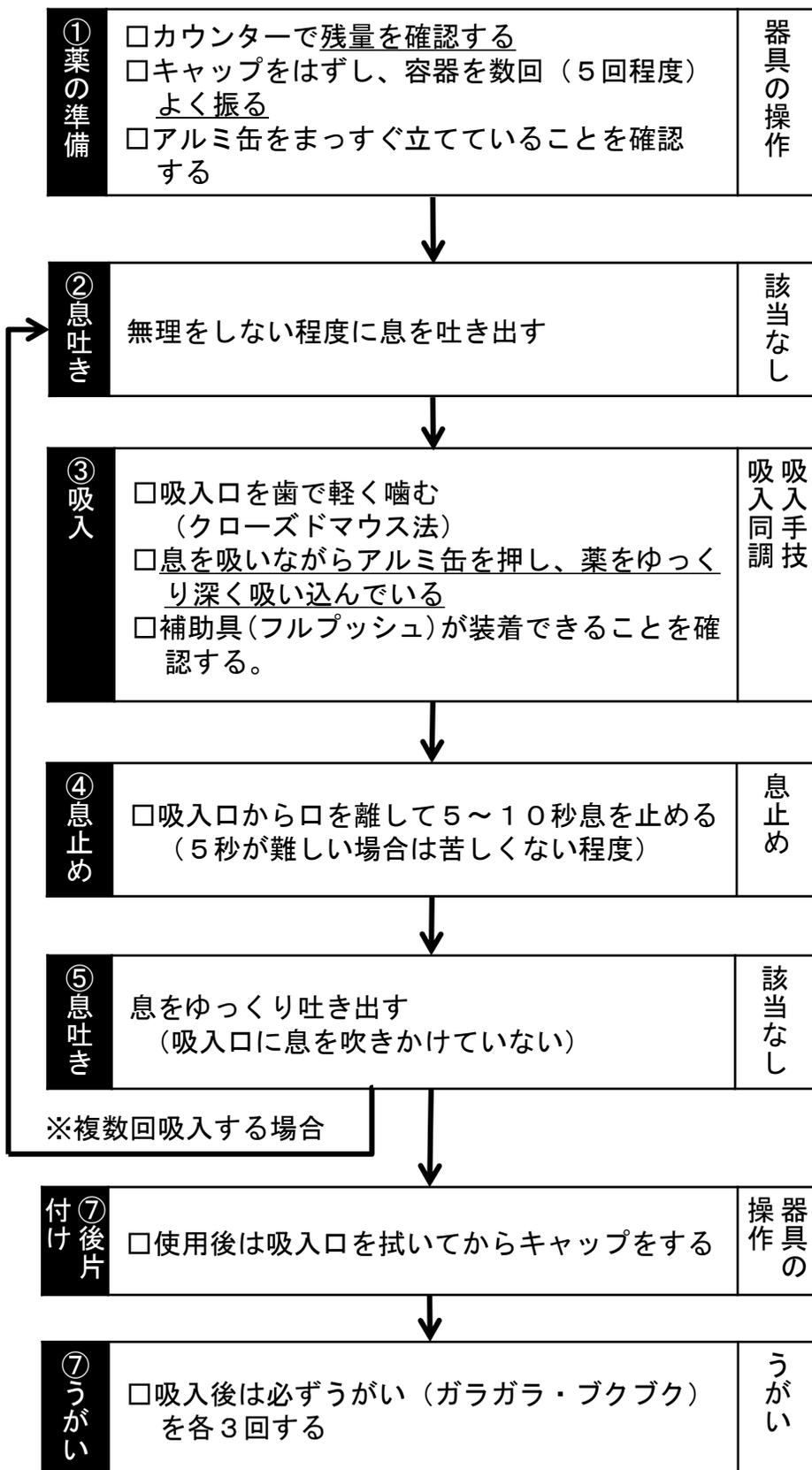

・カウンターが「0」になってもアルミ缶を押し出すことはできるが、十分な量の薬剤を吸入することはできない。

・息吐きはDPIと比較し軽くでも問題ない。（ゆっくり深く吸うため）

・噴霧と吸入の同調が難しい場合やむせる時はスパーサーを考慮する。
 ・吸気は3秒以上かけてゆっくり深く吸う。
 ・江南厚生病院内ではフルプッシュは必ずセットで処方されるため装着可能か確認する。

・気管支への薬剤の沈着率向上のため息止めをする。

・吸入ステロイドは口腔内カンジダや嘔声などの副作用を防止するため吸入後すぐにうがいが必要。
 ・吸入ステロイドを含む複数のデバイスがある場合は混乱を避けるため原則うがいを行うように説明する。